


/ Pas biodrowy

Pneumatyczny system stabilizacji złamań miednicy


Pas biodrowy to nieinwazyjny, zewnętrzny pas do stabilizacji i zabezpieczenia struktur kostnych po urazach miednicy. Nadmuchiwane mankiety wywierają boczny nacisk na miednicę w celu zewnętrznej stabilizacji pierścienia miednicy. Urazy miednicy są bardzo bolesne, a krwawienie miednicze może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.

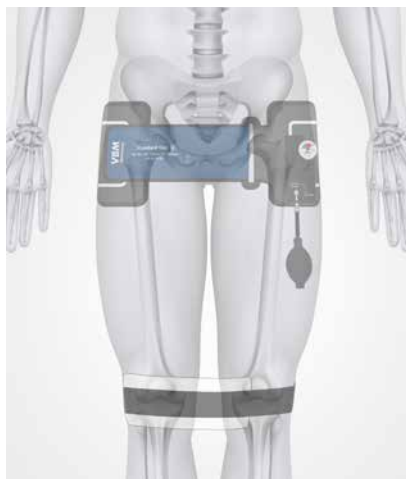

Pas biodrowy z szyną prowadzącą do unieruchomienia kolan



Pas zapakowany w torbę, gotowy do użycia.
Opakowanie: dł. 42 x szer. 19 x 7 cm

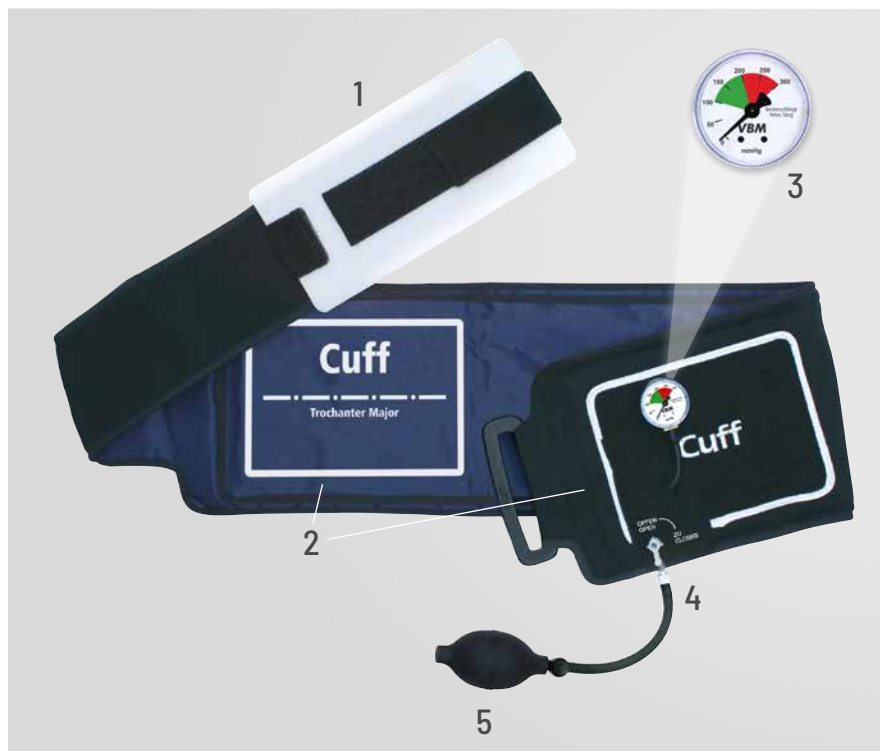

1 Szyna prowadząca / Stabilizacja kolan

- do wsunięcia (przeprowadzenia pasa pod biodrami pacjenta)
- po odłączeniu służy do unieruchomienia kolan i stabilizacji pozycji nóg.

2 Mankiety (napełniane powietrzem)

- wytwarzają boczny ucisk miednicy
- zapewniają szybkie zabezpieczenie bez zbędnych i bolesnych manipulacji

3 Manometr

- kontrola ciśnienia

4 zawór zamykający

- uszczelnienie mankietu na czas transportu

5 Ręczna pompka

- do napełniania i wypuszczania powietrza
- np. przed badaniem MRI

Informacje
o zamawianiu

Pas biodrowy / z manometrem i ręczną pompką, jednorazowy

Rozmiar	Pacjent	Obwód bioder	REF	Ilość w opakowaniu
S	Junior	70 – 90 cm	34-10-006	1
M	Standard	90 – 110 cm	34-10-004	1
L	Duży	110 – 140 cm	34-10-005	1

Informacje
dodatkowe



Zastosowanie (film)